



MERCI

Avant de vous expliquer le fonctionnement d'Easy Smile, je tiens à vous remercier pour l'achat que vous venez de faire.

Au sein de la société Upshell, nous travaillons dur chaque jour pour répondre à vos besoins. Nous essayons d'offrir les meilleurs produits à un prix abordable pour tous. Si vous trouvez Easy Smile utile et efficace après la première application, nous vous demandons une petite faveur : Partagez votre résultat via un commentaire sur Amazon : vous aiderez d'autres personnes à grandir en tant qu'entreprise italienne, mais aussi d'autres personnes qui cherchent le meilleur blanchisseur parmi ceux qui sont en vente sur Amazon.



COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Notre blanchisseur Easy Smile adopte une technologie innovante de lumière bleue LED. Les rayons bleus réagissent avec le gel blanchissant et éliminent efficacement les taches à la surface des dents. L'embout buccal a été conçu par des études techniques pour être aussi souple que possible. Vous trouverez le kit Easy Smile confortable et ne ressentirez aucune gêne pendant le processus de blanchiment. Lorsque vous mordez sur la gouttière, elle s'adapte à vos dents et les recouvre complètement. Avant de commencer le traitement, il est très important de savoir comment il fonctionne et quelles sont les étapes à suivre. Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer le traitement !

Le blanchisseur est idéal pour l'élimination des : Les taches de café, le tabac, les taches génétiques, la tétracycline, les colorants alimentaires, le vieillissement et d'autres facteurs susceptibles de provoquer des décolorations.

CONSERVATION

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil et conservez-la dans un endroit frais.

GUIDE DE L'UTILISATEUR


1. Rincer l'embout et la bouche avant utilisation.
2. Regardez dans le miroir pour comparer vos dents avec le papier guide et vérifier la couleur de départ.
3. Tournez le stylo à gel blanchissant jusqu'à ce que le gel s'écoule vers la brosse. Appliquez le gel uniformément sur toutes les dents, supérieures et inférieures. N'utilisez pas trop de gel, une plus grande quantité ne donnera pas un résultat meilleur ou plus rapide. Utilisez environ 0,5 ml - 0,7 ml à chaque fois. Évitez d'appliquer le gel directement sur les gencives ou à l'intérieur des lèvres. Si vous l'appliquez par erreur sur les gencives, ne vous inquiétez pas car la sensation de brûlure disparaît en quelques minutes. Veillez à rincer à l'eau.
4. Assurez-vous que la charge est complète avant la première utilisation. Mettez l'embout dans votre bouche et mordez-le, puis allumez la lumière LED en maintenant le bouton enfoncé. Respirez profondément pour réduire la production de salive. (Un excès de salive dilue la concentration du gel).
5. L'appareil de blanchiment s'éteint automatiquement après 16 minutes. Retirez-le, rincez l'embout et la bouche avec de l'eau et comparez à nouveau vos dents avec la carte guide des couleurs pour constater l'amélioration.
6. Ne rien manger ni boire, sauf de l'eau, pendant les 30 minutes qui suivent la fin du traitement.




Rincer la bouche
avant l'utilisation



Appliquer le gel à l'aide du stylo
sur toutes les dents

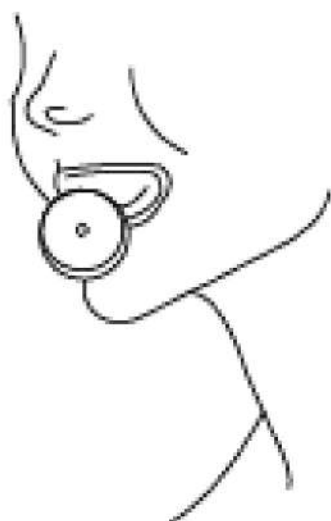

Insérez l'embout buccal et mordez-
le, puis allumer la lumière LED

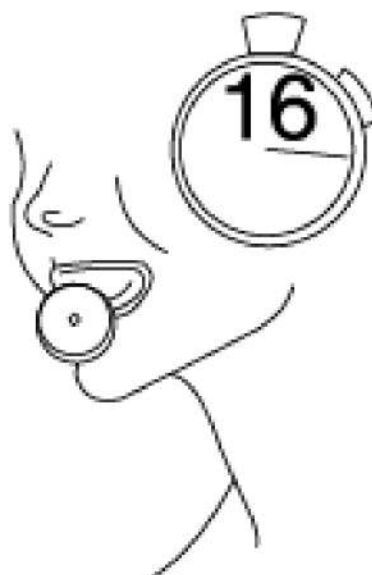

Attendre 16 minutes pour
terminer le traitement



Rincer la bouche
avec de l'eau



Laver l'embout buccal avec de
l'eau et fermer le stylo à gel avec
le capuchon

PROMÉMOIRE

1. Se rincer soigneusement la bouche, sécher complètement l'eau sur la surface des dents et appliquer uniformément le gel sur les dents.
2. L'excès de salive peut diluer la concentration du gel.
3. Les dents sont différentes d'une personne à l'autre, certaines personnes éprouvent une légère sensibilité, c'est un phénomène normal. Un gel désensibilisant peut être appliqué pour soulager l'inconfort. Si la gêne est importante, réduire le temps d'utilisation ou cesser immédiatement l'utilisation.
4. Évitez d'appliquer le gel blanchissant directement sur la gencive ou à l'intérieur des lèvres.
5. Si le gel entre par inadvertance en contact avec votre visage ou vos vêtements, lavez-le immédiatement.
6. Après avoir terminé le traitement de blanchiment des dents, veuillez remettre le capuchon sur le stylo afin d'éviter que l'ingrédient actif ne se volatilise.
7. Conservez le produit dans un endroit hors de portée des enfants.
8. Il est recommandé de ne pas utiliser le blanchisseur plus de 4 fois par semaine.

INGREDIENTS

Sorbitol, eau, acide phtalimidoperoxyproïque (PAP), propylène glycol, glycérine, nitrate de potassium, PEG-8, hydroxyapatite, gomme de cellulose, hydroxyéthylcellulose, gomme de xanthane, saccharine sodique, menthol, méthylparabène, jus de feuilles d'Aloe Barbadensis (Aloe Vera), extrait de Chamomilla Recutita, extrait de graines de Punica Granatum, bicarbonate de sodium, propylparabène.

NOTE

1. Le temps de charge est d'environ 2 heures.
2. État de charge : l'embout Easy smile clignote lorsqu'il est en cours de charge.
3. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
4. La durée de vie du blanchisseur est d'environ 24 mois.